


Τρόπος μέτρησης μεγέθους κάλτσας σιλικόνης

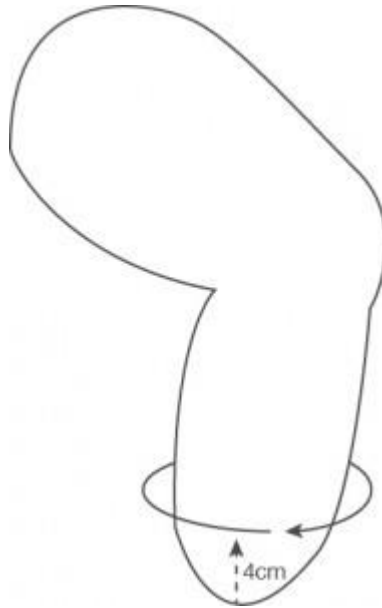

Η μέτρηση πραγματοποιείτε με μια μεζούρα περιμετρικά από το κολόβωμα, 4cm πιο ψηλά από το τέρμα του κολοβώματος, χωρίς να σφίγγουμε, αλλά ούτε και να υπάρχουν κενά, να ακουμπάει απαλά η μεζούρα κατά το συνολικό μήκος της στο κολόβωμα. Το σωστό μέγεθος κάλτσας είναι το αμέσως προηγούμενο από αυτό που εμφανίζει η μεζούρα. Πχ εάν η μεζούρα δείξει 30cm η κάλτσα θα πρέπει να είναι Νο 28, κτλ